



Designet
for et livsløp,
valgfrihet
og verdier

ARJO UNIVERSELL PLATTFORM FOR SYKEHUSSENGER

Grunnlaget for pasientenes komfort

arjo

Sikkerhet og enkel bruk uansett omsorgsmiljø

Sengen er viktig for den daglige pasientpleien, enten det dreier seg om kortvarige innleggelser eller langvarig rekonvalesens. Den er designet for å skape et trygt miljø rundt pasientpleien, der hvile og rekonvalesens skal være både sikker og terapeutisk.

Ingen pasienter er like, og det kan være en utfordring å tilfredsstille de individuelle behovene. Vi i Arjo tilbyr et stort utvalg av ergonomiske sykehussenger som er designet for å skape et ideelt miljø for pasientene, uavhengig av kliniske behov, selvstendighet og pleienivå, innen både intensivpleie og andre avdelinger.

Vår universelle plattform for sykehussenger er designet for å skape et trygt miljø for pasientpleie og restitusjon, og for å bidra til å redusere faren for skader hos pleiepersonalet.



Designet for et livsløp



Grunnleggende pleie i hverdagen

Våre sykehussenger er designet for optimal arbeidsflyt, for å fremme livskvalitet og for å bidra til å redusere vanlige risikoer som fall, fastklemming og skader hos pleiepersonalet. Sengene våre har ergonomiske funksjoner som sikrer at du kan arbeide trygt og effektivt, og som bidrar til den grunnleggende daglige pleien og til å nå de kliniske målene.



KLINISK EFFEKTIVITET

Vårt utvalg av sykehussenger har innebygde kliniske funksjoner og profileringsalternativer for avansert pasientpleie.

- Ryggstøttepause ved 30° vinkel
- Hjertebrett
- Indikator for hjertebrettvinkel
- Ettrykks betjening
- Bio-contour profileringsystem
- Auto-Fowler
- Veiing i sengen

De tilgjengelige funksjonene avhenger av sengemodellen, se tabellen på side 4 og 5.



PASIENTSIKKERHET

Alle sykehussenger fra Arjo har et omfattende utvalg sikkerhetsfunksjoner:

- Lav sengehøyde
- IEC 60601-2-52-samsvar for å redusere faren for fastklemming av pasienten
- Nattdlys under sengen
- Varizone sengealarm
- System som hindrer at noe setter seg fast under sengen
- Bakgrunnsbelyst kontrollpanel
- SafeSet visuelt varslingsystem
- Pleiertilkalling og høyttaler

De tilgjengelige funksjonene avhenger av sengemodellen, se tabellen på side 4 og 5.



EN INTEGRERT TILNÆRMING TIL TRYKKSÅRFOREBYGGING







Våre sykehussenger støttes av en komplett portefølje av trykkavlastende madrasser for pasienter som har eller er utsatt for trykkskader.

En universell plattform for sykehussenger for vedvarende og høy pleiekvalitet

Den universale plattformen dekker alle akuttnivåer og spenner over flere pleiesituasjoner, fra kirurgi til intensivpleie, og er et fornuftig valg for sykehus der behovene utvikler seg. Sengene våre bygger på en basisutforming som er konsistent gjennom hele utvalget, med lav vekt og god manøvrerbarhet, standardiserte sikkerhetsfunksjoner og intuitiv betjening.

Designet for valgfrihet



		Sengehester	Profilering	Sikker arbeidsbelastning	Kontroll	Auto ryggstøttepause ved 30°	Énknapps hjerte Brett	3-trinns sengeførlenger	Nattlys under sengen	Fotbryter for variabel høyde	Sammenleggbare sengehester	Veing i sengen	Varizone sengealarm
HØYT PLEIEBEHOV	 Enterprise® 5000X	Nedfellbare	Bio-Contour	250 kg	2 håndkontroller	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-	-
	 Enterprise® 5000X	Delte sengehester	Bio-Contour	250 kg	2 håndkontroller	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	-	-
MIDDELS PLEIEBEHOV	 Enterprise® 8000X	Delte sengehester	Bio-Contour	250 kg	integriert pasient- og pleierbetjening	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
	 Enterprise® 9000X	Delte sengehester	Bio-Contour	250 kg	TV-/lysbetjening*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
LAVT PLEIEBEHOV	 Citadel™	Delte sengehester	Pro-Contour	270 kg	TV-/lysbetjening*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Delte sengehester	Pro-Contour	522 kg	Pleier-tilkalling, TV-/lysbetjening*	✓	✓	✓	✓	✓*	-	✓	✓



Nimbus® Professional

Sengerammer og madrasser for alle kliniske behov

En serie trykkavlastende madrasser med og uten elektrisk drift er tilgjengelige for alle sengerammene, for støtte til pasienter som har eller er utsatt for trykksår. Integrerte madrasser som danner en fleksibel løsning for pasienter med høyt pleiebehov er tilgjengelige for Citadel™ pasientbehandlingssystem.

Vår "Bio-Contour"-design er en unik kombinasjon av bevegelige sengeseksjoner og en kurvet sengebunn, som er designet for å forbedre madrassens håndtering av trykk og friksjon.

Antiklemsystem	Toveis pleiertilkalling	RS232-dataport	SafeSet visuelle varslinger	Integrerte terapioverflater	Skin IQ-uttak	Tilbehørsuttak	Breddejusterbar plattform	PowerDrive med fast håndtak	IndiGo intuitiv fremdriftsassistent
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	✓*
✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	-	-	✓*
✓	✓	✓*	✓*	-	✓	✓*	✓	✓*	-

Nå med intuitiv fremdriftsassistent

IndiGo™ er et motorisert femte hjul som gjør transporten lettere for pleierne ved bare én berøring – sikkert og enkelt. IndiGo er alltid tilgjengelig, og er bygd direkte inn i Citadel- eller Enterprise-sengen, slik at bare én ting endrer seg for pleierne: kraften som kreves for å flytte sengen.

Les mer om IndiGo: Arjo.no/indigo

Opptil
60 %
mindre
kraft i



motbakker¹

Opptil
70 %
mindre
kraft i



nedoverbakker¹

360°
– kan brukes
i alle posisjoner
rundt sengen



A healthcare professional in purple scrubs is standing by a hospital bed, attending to a patient. The patient is lying in the bed, wearing a grey long-sleeved shirt and glasses. The bed has a white blanket and a grey frame with control panels. The background is a plain, light-colored wall with some medical equipment visible.

Designet
for verdier

En kostnadseffektiv og fleksibel løsning

Vårt store utvalg inneholder også fleksible leie-, salgs- og leasingalternativer som er utformet for å gjøre løsningene våre mest mulig rimelige og investeringen mest mulig lønnsom. Alle Arjo-senger støttes dessuten av fullstendige service- og vedlikeholdsalternativer som kan skreddersys etter institusjonens behov.



Enkel service og vedlikehold

Formstøpte madrassunderlag er lette, glatte og enkle å fjerne, og den åpne rammen er designet for å være svært enkel å rengjøre, slik at løsningen er egnet for rengjøring og dekontaminering som en del av kravene til infeksjonsforebygging.

Lett tilgjengelige og avtakbare komponenter betyr at én kvalifisert person kan utføre arbeid på aktuatorer, kontrollboks, håndsett, batteri og hjul, på stedet og på bare noen få minutter: det gjør det enklere for teknikerne å utføre service på og vedlikehold av sengen.




Lave total kostnader

Alle Arjo sykehussenger er designet for å være sterke og holdbare med lang levetid, og er levetidstestet og UL-sertifisert i henhold til IEC-standardene for styrke og stabilitet. Den åpne arkitekturen med plug & play-komponenter og selvsørende ledd bidrar til lave total kostnader i produktets levetid. Felles komponenter på tvers av hele produktutvalget reduserer behovet for lagerføring av deler.



Arjo sykehussenger er designet for livet, valgfrihet og verdi

Skann QR-koden for å se demonstrasjonsvideoen.
Bare rett kameraet på smarttelefonen din mot QR-koden.
(Android-telefoner trenger kanskje en app som leser QR-koder.)

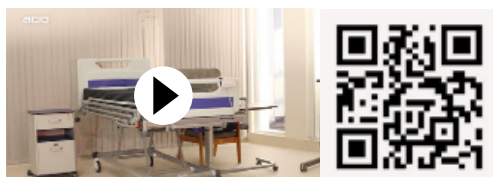

Videopresentasjon av Enterprise®-serien

Senger for høyt og middels pleiebehov



Citadel®-video

Seng for lavt pleiebehov



Citadel™ Plus-video

Bariatrisk sykehusseng



IndiGo™-video

Intuitiv fremdriftsassistert



Våre sykehussenger er uavhengig testet av den globalt anerkjente organisasjonen UL, for å bekrefte at de samsvarer med de nyeste kravene til stabilitet, dimensjoner og sikkerhet i standarden IEC60601-2-52.

Litteratur: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Mars 2020 Utstyr og produkter som leveres av Arjo krever bruk av originale deler fra Arjo, som er laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel. ® og ™ er varemerke som tilhører Arjo konsernet.
© Arjo, 2020

Vi i Arjo mener at gode forutsetninger for mobilitet i pleiesituasjoner er avgjørende for å kunne tilby pleie av høy kvalitet. Våre produkter og løsninger er utviklet for å fremme en trygg og verdig opplevelse gjennom pasientforflytning, sykehussenger, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og forebygging av trykksår og venøs tromboembolisme. Med 60 års erfaring med å forbedre hverdagen for pasienter og pleiere, og et globalt team på over 6 000 personer, arbeider vi for å skape bedre resultater for mennesker som står overfor utfordringer knyttet til mobilitet.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Norge AS · Olaf Helsetts vei 5 · 0694 Oslo · Norway · +47 22 08 00 50

www.arjo.no

ARJO

Arjo.A002091.0.NO.NO